

Инкубаотри с охлаждане чрез екологичната пелтие технология – икономично и екологично

NEW



Модел KB ECO 1020

Размери: 240 L, 720 L, 1020 L

Серията KB ECO

Благодарение на пелтие технологията за охлаждане с патентовано разсейване на топлината, новата климатична камера KB ECO е една от най-енергийно ефективните камери за стабилност на пазара. Пелтие технологията за охлаждане означава, че серията KB ECO също е много тиха по време на работа.

- Температурен диапазон: 0 °C to +70 °C (max. 26 °C под стайната температура)
- ART.line™ технология за нагряване
- Електрически контрол на температурата благодарение на пелтие модула с иновативно разсейване на топлината
- Вътрешна врата от закалено безопасно стъкло
- Вътрешна камера, изработена изцяло от неръждаема стомана
- 2 рафта от неръждаема стомана
- Регулируема защита срещу конденз

БЕЗОПАСНО




Уникална защита от конденз и изсушаване при всички работни условия

НАДЕЖНА



Безопасна работа благодарение на интелигентното пелтие темпериране

УМНО

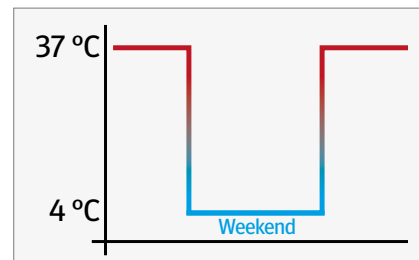

Програмируеми температури за периодична инкубация и охлаждане

ИКОНОМИЧНА



Консумацията на енергия е минимална благодарение на оптимизираното пелтие охлаждане

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Описание	KB ECO 240	KB ECO 720	KB ECO 1020
Измерване			
Вътрешен обем [L]	247	700	1020
Нетно тегло на апарата (празен) [kg]	152	272	327
Допустимо натоварване [kg]	100	150	150
Допустимо тегло на рафт [kg]	30	45	45
Отстояние от стенат до гърба на камерата [mm]	100	100	100
Отстояние от стени до страните на камерата [mm]	100	100	100
Вътрешни размери			
Ширина [mm]	650	973	1255
Височина [mm]	785	1250	1925
Дълбочина [mm]	485	576	1266
Размерите на корпуса не вкл. фитинги и връзки			
Ширина [mm]	925	1250	1250
Височина [mm]	1461	1925	1925
Дълбочина [mm]	796	885	1149
Температурни данни			
Температурен обхват (max. 26 °C под стайна температура) [°C]	–	0...70	0...70
Температурен обхват (max. 28 °C под стайна температура) [°C]	0...70	–	–
Температурни фуктоации при 37 °C [± K]	0,1	0,1	0,1
Температурни вариации при 37 °C [± K]	0,1	0,1	0,1
Време за възстановяване след 30 сек отваряне на вратата при 37 °C [min]	3	4	4
Електрически данни			
Номинална мощност [kW]	0,9	1,3	1,3
Екологични данни			
Енергийна консумация при 4°C	100	185	190
Енергийна консумация при 37 °C [Wh/h]	65	105	105
Рафтове			
Брой рафтове (стандартно./максимално.)	2/9	2/15	2/15

ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ



Прот за достъп



Заклучване на вратата



Софтуер за мониторинг
APT-COM™ 4



LED-осветителни тела